


SCIENCES ANALYTIQUES SYNTHÈSE & PURIFICATION

CONSOMMABLES,
RÉACTIFS & INSTRUMENTS



Advion Interchim
scientific

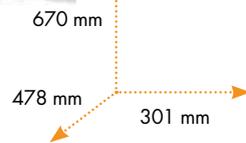

MultiVap54

Système Automatique d'Evaporation sous flux d'azote

Le système d'évaporation automatique MultiVap54 est un instrument compact permettant de traiter jusqu'à 54 échantillons simultanément.

Ce système est spécialement conçu pour des évaporations de routine nécessitant une productivité importante. Cette nouvelle génération d'évaporateur permet d'obtenir un gain d'efficacité sur l'évaporation grâce à l'ajustement automatique des aiguilles en fonction du niveau des échantillons. Ce principe innovant entraîne une nette diminution de la consommation en gaz.

Spécifications techniques :

- Evaporation jusqu'à 54 échantillons en simultanés
- Volumes d'échantillons : 2 mL jusqu'à 200 mL
- Ecran tactile 7" intégrant un logiciel intuitif (création & sauvegarde des méthodes)
- Contrôle & Lancement individuel des évaporations
- Réglage manuel ou automatique de la hauteur des aiguilles par rapport aux niveaux des échantillons
- Evacuation des vapeurs générées
- Température du bac de chauffage : ambiante à 100°C (Capacité maximale eau : 8 Litres)
- Systèmes d'alarmes du niveau minimum d'eau & alimentation en gaz
- Fenêtre de visualisation du procédé d'évaporation (lumière intégrée facilite le contrôle visuel dans l'appareil)
- Vidange du bain d'eau facilitée
- Gradient de pression programmable
- Faible consommation en gaz
- Accessoires fournis avec l'appareil (verreries, rack, connectiques)
- Pression d'alimentation : 2 à 6,89 bar (pression recommandée : 2 bar)
- Poids : 34 kg

Description	Réf.	Qté
Appareil MultiVap54 - 54 positions	US-MP5000	1
Accessoires		
Rack pour vials 2 mL vials 12 x 32 mm - 54 positions	MV5-SP002	1
Rack pour vials 10 mL 15,5 x 100 mm - 54 positions	MV5-SP010	1
Rack pour vials 20 mL vials 18 x 135 mm - 54 positions	MV5-SP014	1
Rack pour vials 40 mL vials 27,5 x 95 mm - 24 positions	MV5-SP015	1
Rack pour vials 60 mL vials 27,5 x 140 mm - 24 positions	MV5-SP016	1
Rack à façon sur demande		

+ D'INFO


- Vidéo démonstration sur notre chaîne YouTube
<https://youtu.be/ujARx1bMqo>



- Demande devis & démonstration
analytical-sciences@advion-interchim.com
+33 4 70 03 73 09

VISITEZ WWW.ADVION-INTERCHIM.COM À TOUT MOMENT

Le nouveau site web d'Advion Interchim Scientific offre des informations sur les derniers instruments et consommables. Lisez les nouvelles notes d'application, renseignez-vous sur nos prochaines conférences et événements, ou entrez en relation avec votre contact commercial local.

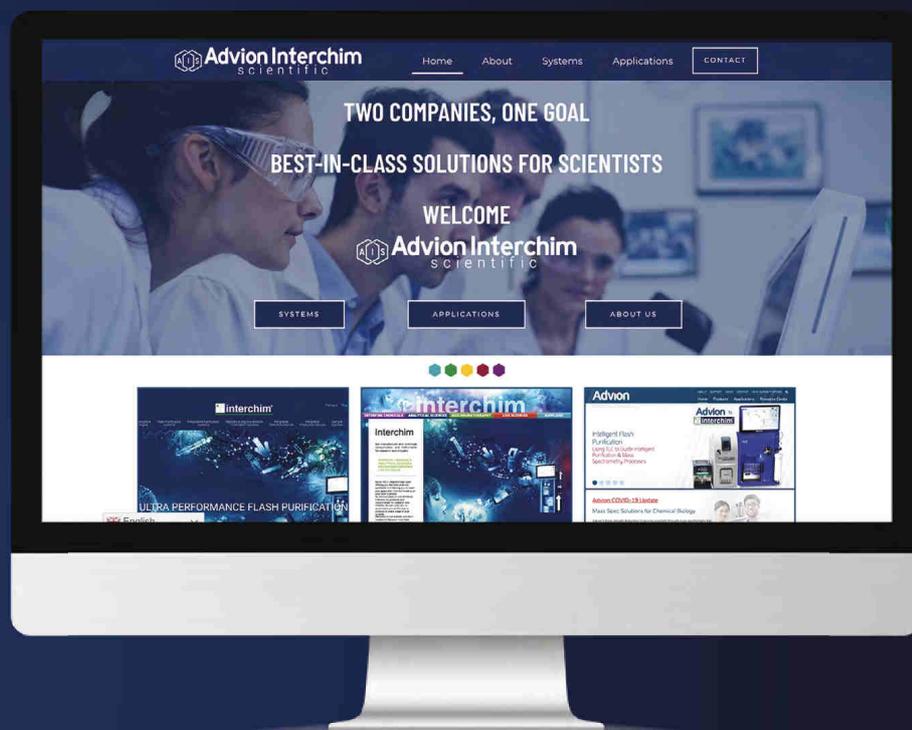

VOUS CHERCHEZ ENCORE PLUS D'INFORMATIONS SUR ADVION INTERCHIM SCIENTIFIC ?

blog_fr.interchim.com
blog.interchim.com

Consultez nos blogs en version française ou anglaise.

Venez enrichir vos connaissances via nos articles techniques. Découvrez nos nouveautés, nos astuces et conseils d'optimisation. Partagez avec nous vos plus beaux succès.

www.flash-chromatographie.com
www.flash-chromatography.com

Découvrez nos sites web dédiés à nos solutions de flash-purification et chromatographie préparative.

Réalisez vos configurations d'instruments en ligne, bénéficiez de conseils personnalisés et effectuez vos demandes de devis.

L'application : TLC to Flash & prep Chromatography*

Révolutionnez votre chromatographie sur couche mince avec notre application smartphone dédiée.

**De la CCM à la chromatographie préparative Flash*



COMMENT PASSER VOS COMMANDES

A l'écoute de vos différents besoins, Advion Interchim Scientific vous propose 5 solutions pour commander facilement et rapidement vos produits.



Par Téléphone

+33 4 70 03 88 55

Hotline Sciences Analytiques : +33 4 70 03 73 09



Par Courrier

211 bis Avenue J.F Kennedy - CS41140

03103 MONTLUÇON CEDEX - FRANCE



Par Fax

+33 4 70 03 82 60



Par Internet

www.interchim.com • www.advion-interchim.com

www.flash-chromatography.com



Par Courriel

analytical-sciences@advion-interchim.com

COMMENT SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ

Soyez les premiers avertis de nos nouvelles publications d'articles, de vidéos ou encore de nos événements à venir en nous suivant sur nos réseaux :



<https://www.youtube.com/user/Interchim>



<https://www.linkedin.com/company/advioninterchimeurope/>



<https://www.facebook.com/AdvionInterchimEurope>



<https://twitter.com/InterchimAdvion>





www.advion-interchim.com

Interchim SAS | 211 Bis avenue J.F. Kennedy – CS41140 | 03103 MONTLUÇON CEDEX | FRANCE
Advion Inc. | 61 Brown Rd. | Suite 100 | Ithaca, NY 14850 | USA